



Zen-O^{lite}™

Concentrador de oxígeno portátil ultra liviano

Oxígeno portátil a demanda para mantener un estilo de vida activo.



SIMPLE. CÓMODO. CONFIABLE.

DE A SUS PACIENTES LA OPORTUNIDAD DE MANTENERSE ACTIVOS E INDEPENDIENTES

Con Zen-O *lite*[™], el concentrador de oxígeno portátil de GCE, usted puede ayudar a sus pacientes de oxigenoterapia a largo plazo a que logren mantener un estilo vida más

independiente. Es ultra liviano pesa solo 2.5kg (5.5 lb) es compacto y portátil para llevarlo consigo a donde quiera.



Zen-O *lite* con indicador de detección de respiración integrado.



El Zen-O *lite*[™] es confiable y fácil de operar desde su pantalla digital y viene acompañado con un cómodo kit de transporte que ayuda al paciente a mantener una vida activa y sin restricciones.

SOLUCIÓN INTEGRAL

Zen-O *lite*TM ofrece todo lo que necesita el paciente para que continúe disfrutando de actividades fuera de su hogar.



El equipo incluye batería de litio-ion, cargador de carro y casa, cables de conexión, y con opción a compra de una práctica mochila para mayor comodidad.

También incluye manual de usuario y una amigable guía rápida de operación.



SATISFACE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE

Los proveedores de oxígeno se beneficiarán, ya que el Zen-O *lite*TM le ayudará a satisfacer el deseo de los pacientes con trastornos respiratorios a continuar sus vidas con libertad, sin restricciones, tanto como le sea posible

Siendo el equipo ultra liviano y con tecnología de ajuste de caudal esto le permite al paciente salir de sus hogares y continuar disfrutando de sus actividades favoritas.



OXIGENO A DEMANDA

El Zen-O *lite*TM entrega oxígeno a demanda (puso) acorde a lo que el cliente requiera.

Ya sea que su paciente está subiendo escaleras o si salió a caminar, el Zen-O *lite*TM responderá automáticamente acorde a su respiración y ajustará la cantidad de oxígeno necesaria para asegurar que se mantenga la saturación de oxígeno.

La salida de oxígeno es hasta un litro por minuto y la duración de la batería es de hasta 4 horas (en modo de demanda -pulso- ajuste 2).



FABRICACIÓN DE CALIDAD

Mientras Zen-O *lite*TM reduce las limitaciones en el estilo de vida de sus pacientes, los proveedores de oxígeno a domicilio también aprovecharán de su fácil mantenimiento, sin complicaciones.

Esto le asegura costos operativos bajos y mayor éxito para su negocio.



CAMBIO DE COLUMNAS LOCALMENTE EN SU PAÍS

Si las columnas de zeolitas requieren ser cambiadas, no es necesario incurrir en gastos de envío a GCE o a un servicio técnico autorizado con riesgos de demoras o con la necesidad de rentar temporalmente otra unidad mientras espera.

Gracias a nuestra presencia local, el cambio de las columnas es muy fácil de solicitar. El reemplazo sólo toma unos minutos con solo el uso de herramientas sencillas.

Una vez las columnas han sido satisfactoriamente cambiadas, el Zen-O *lite*TM es actualizado fácilmente desde el panel.



SIMPLE. CÓMODO. CONFIABLE.

FABRICACIÓN DE CALIDAD

El Zen-O *lite*TM ofrece a los pacientes total confianza, está diseñado para resistir el uso diario y continuo y ha sido probado por un laboratorio independiente reconocido internacionalmente.

El Zen-O *lite*TM está fabricado en Inglaterra con componentes y accesorios seleccionados y probados cuidadosamente. Es ultra liviano y silencioso, sus pacientes no notarán que está ahí.

Y para mayor seguridad, el concentrador de oxígeno portátil Zen-O *lite*TM tiene 3 años de garantía. Las columnas tienen un año de garantía.

ESTANDARES DE FABRICACION

Zen-O *lite*TM cumple con las siguientes normas:

- Directiva de dispositivos médicos Europeos
- FDA, Food and Drug Administration
- Administración federal de aviación de Estados Unidos en modo de pulso.





SUS BENEFICIOS

- Satisface las necesidades de pacientes activos
- Bajo costo
- Mantenimiento mínimo
- Pocas llamadas por servicio debido a su robusto diseño
- Disponibilidad rápida y sin esperas

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

- Más libertad de movimiento
- Confiable – Brinda confianza
- Ultra liviano, diseño moderno
- Panel LCD
- Guía de usuario fácil de entender
- Cómoda bolsa de transporte
- Opcional: Mochila de transporte

Código	Descripción
RS-00608-G-S	Concentrador Zen-O <i>lite</i> ™ con una batería de 8 celdas y accesorios**
RS-00608-G-D	Concentrador Zen-O <i>lite</i> ™ con dos baterías de 8 celdas y accesorios**
Accesorios Zen-O <i>lite</i>™	
RS-00619	Mochila Zen-O <i>lite</i> ™
RS-00523	Bolso para guardar accesorios
RS-00515	Cargador de batería externo - con conexión americana
RS-00516	Cargador de batería externo - con conexión europea
RS-00517	Cargador de batería externo - con conexión Inglesa
Recambios Zen-O <i>lite</i>™	
RS-00606	Bolso Zen-O <i>lite</i> ™
RS-00621	Correa de bolso Zen-O <i>lite</i> ™
RS-00601	Batería recargable para el Zen-O <i>lite</i> ™
RS-00605	Cargador para auto Zen-O <i>lite</i> ™
RS-00602	Cargador y Cable con conexión europea (pata redonda)
RS-00603	Cargador y Cable con conexión Inglesa
RS-00604	Cargador y Cable con conexión americana (pata plana)
RS-00617	Llave para cambio de filtros para salida a paciente Zen-O <i>lite</i> ™
RS-00512	Paquete de 10 filtros para cánula de oxigenoterapia Zen-O <i>lite</i> ™
RS-00616	Tamices de zeolita de recambio (par)
RS-00620	Tapa cubre batería Zen-O <i>lite</i> ™
RS-00618	Compresor de recambio Zen-O <i>lite</i> ™
Extensión de garantía Zen-O <i>lite</i>™	
RS-1YRWTY	Extensión de garantía de 1 año Zen-O <i>lite</i> ™ (3 años)
RS-2YRWTY	Extensión de garantía de 2 años Zen-O <i>lite</i> ™ (4 años)



** El Zen-O *lite*™ se entrega con bolso de transporte, batería, cables y cargador para el auto y casa.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño:	249 mm × 97 mm × 231 mm (9.8" × 3.8" × 9.1")
Peso:	2.5 kg (5.5 lbs) sin la bolsa
Fuente de poder:	AC adaptor: 100-240V AC(+/- 10%) 50-60 Hz entrada, 24V DC, 5.0A salida DC adaptador: DC 11.5 - 16V DC entrada, 19V, 6.3A salida
Pureza:	87% - 96% en todas las opciones
Presión de descarga máxima de oxígeno:	20.5 psi
Nivel de esfuerzo inspiratorio:	-0.12cm/H ₂ O
Rango de humedad:	5% a 93% ± 2% sin condensación
Temperatura:	
Funcionamiento:	5°C (41°F) y 40°C (104°F)
Almacenamiento:	-20°C (-4°F) y 60°C (140°F)
Ajustes:	Incrementos de 0.5 de 1.0 a 5.0
Nivel de ruido:	38 dB(A)*
Altitud de uso:	Hasta 4000 metros (13,000 pies)
Duración de Batería:	Aprox. 4 horas*

*En modo a demanda (a pulso)-ajuste 2.

SIMPLE. CÓMODO. CONFIABLE.


OTRA OPCIÓN

Para pacientes que necesiten más oxígeno, GCE le ofrece el concentrador de oxígeno portátil Zen-O™. Su peso es de 4.66kg (10lbs) y su capacidad de entrega de oxígeno es de 2 litros por minuto.

El Zen-O™ es uno de los pocos concentradores para oxigenoterapia en el mercado que le brindan al paciente la opción de escoger el suministro entre flujo continuo o a demanda. Esto significa que el flujo puede ser continuo/ constante para las noches cuando duerme o bien a demanda (pulso).



GCE EN EL MUNDO

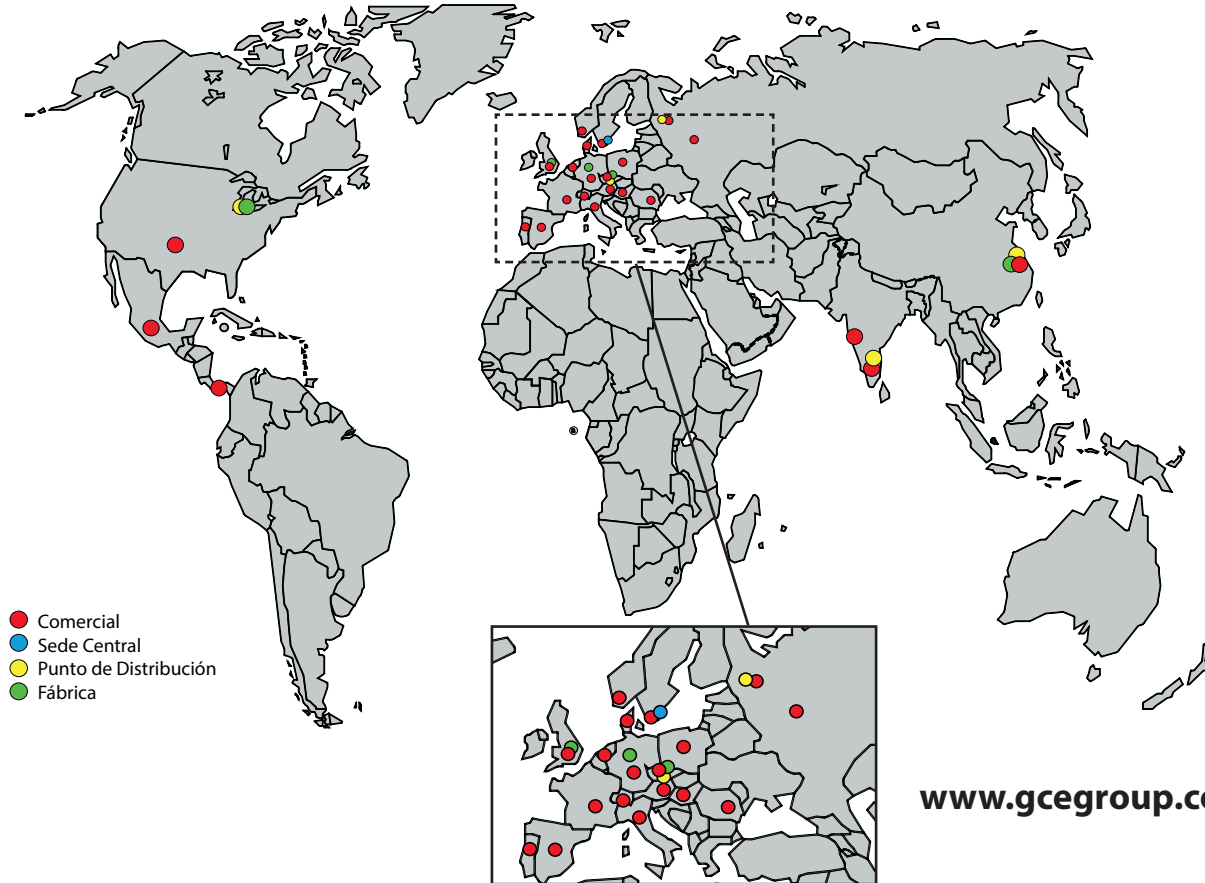

EUROPE

CZECH REPUBLIC

GCE Trade s.r.o.
Zizkova 381
CZ-583 01 Chotebor
Phone: +420 569 661 122
Fax: +420 569 661 107
sales.cz@gcegroup.com

FRANCE

GCE S.A.S.
70, rue du PUITES CHARLES
BP N° 40110
FR-58403 La Charité-sur-Loire
Phone: +33/3 86 69 46 00
Fax: +33/3 86 70 09 15
sales.fr@gcegroup.com

GERMANY

GCE GmbH
Weyherser Weg 8
36043 Fulda
Phone: +49 (0)661-8393-0
Fax: +49 661 8393 25
sales.de@gcegroup.com

HUNGARY

GCE Hungária Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 68.
H-2314 Halásztelek,
Phone: +36 (24) 521 200
Fax: +36 (24) 521 201
sales.hu@gcegroup.com

ITALY

GCE Mujelli spa
Via F. Cervi, 11
37036 San Martino B.A. (VR)
Phone: +39 045 878 0 525
Fax: +39 045 878 0 750
sales.it@gcegroup.com

POLAND

GCE Sp z o.o.
ul. Drapińska 12
03-581 Warszawa
Phone: +48 22 511 23 57
Fax: +48 22 677 70 90
sales.pl@gcegroup.com

PORTUGAL

GCE Portugal
Rua do FeiraPark, 50,
Piso 2, sala 8
PT-4520-632 São João de Vêr
Phone: +351 256 373 682
Fax: +351 256 378 260
sales.pt@gcegroup.com

RUSSIA

GCE Krass OOO
Russian Federation
129343, Moscow,
Urzhymyskaya Street, no 4
Phone: +7 495 745 26 99
Fax: +7 495 745 26 90
sales.ru@gcegroup.com

RUSSIA

GCE Krass OOO
Russian Federation
194100, Sankt Petersburg
Kantemirovskaya, 12A
Phone: +7 812 323 86 21
Fax: +7 812 323 86 49
sales.ru@gcegroup.com

ROMANIA

GCE Romania S.R.L.
22, Al.Puskin Street, Ap.1,
Bucharest 1, 011996
Phone: +40 21 316 76 72
Fax: +40 21 316 76 74
sales.ro@gcegroup.com

SPAIN

GCE Ibérica, S.L.U.
Avda. de la Democracia,
7 - Oficina 311
ES-28031 Madrid
Phone: +34 915 711 470
Fax: +34 915 712 756
sales.es@gcegroup.com

SWEDEN

GCE Norden AB
Box 21044
Källvattengatan 9
200 21 Malmö
Phone: +46-40-388300
Fax: +46-40-388353
sales.se@gcegroup.com

UNITED KINGDOM

GCE Ltd.
100 Empress Park, Penny Lane
Haydock, St Helen's
WA11 9DB
Phone: +44 (0)1942 29 29 50
Fax: +44 (0)1942 29 29 77
sales.gb@gcegroup.com

ASIA

CHINA

GCE Gas Control Equipment Co., Ltd.
No.4 Building, 318 Xiao Wan Road
Fengxian District, Shanghai 201401
P.R. China
Phone: +86-21-37198408
Fax: +86-21-37198617
sales.cn@gcegroup.com

INDIA

GCE India Representation Office
Offices No. 44 & 45, 2nd Floor,
Crystal Plaza, Hiranandani Complex,
Sector - 7, Kharghar,
Navi Mumbai. 410 210,
Maharashtra, India
Mobile:+91-9987026546
sales.in@gcegroup.com

INDIA

GCE India Pvt. Ltd.
59, 1st Floor,
Millers Road, Benson Town,
Bangalore - 560046, Karnataka
Phone: +91 802 363 1685
Fax: +91 802 353 0110
sales.in@gcegroup.com

AMERICAS

MEXICO

GCE Gas Control Equipment SA de CV
Miguel de Cervantes Saavedra 193
Ampliación Granada Miguel Hidalgo
Distrito Federal 11529, México
Phone: +52 55 2626 1439
sales.pa@gcegroup.com

PANAMA

GCE Latin America
Po.Box: 0843-01211
Panamá
Republica de Panamá
Phone: +507 317 61 68
Fax: + 507 317 65 00
sales.pa@gcegroup.com

UNITED STATES OF AMERICA & CANADA

Gas Control Equipment Inc.
1508 Windsor Forest Trail
Keller, TX 76262
U.S.A.



Gas Control Equipment
america.latina@gcegroup.com
www.gcegroup.com