


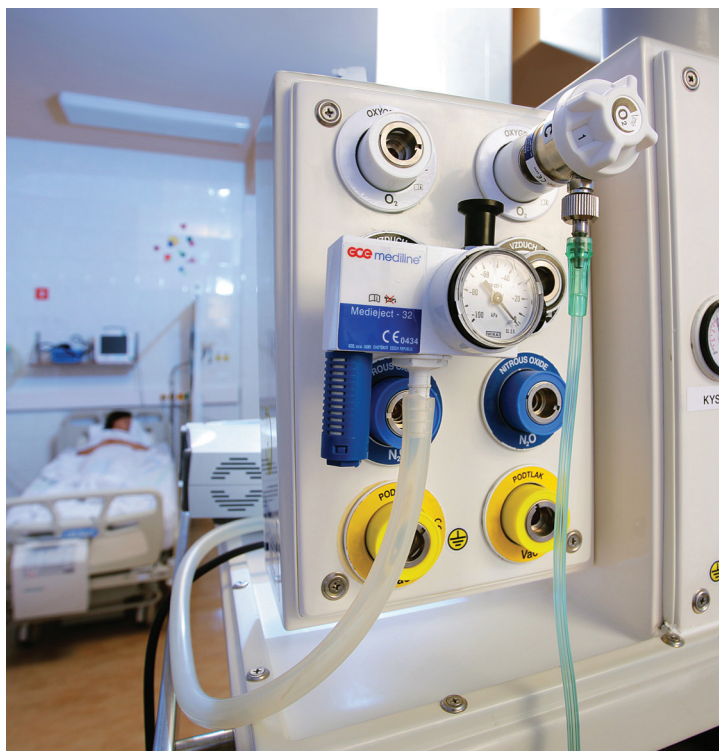

SZÍVÓ EJEKTOR **MEDIEJECT**

1/2015 KIADÁS

**A szívó ejektor MediEject venturi elven hoz létre vákuumot.
Minden váladékszívó terápiához megfelelő.**

ELŐNYÖK


- Használható vákuum-forrás nélküli kórházakban
- Használható hordozható váladékszívó rendszerhez
- Alacsony zajszint
- Maximális szívó hatás -80 kPa (-800 mbar)
- Kapható közvetlen csatlakozással vagy medikai sínes csatlakozással tömlővel együtt
- A szívó hatás tűszelepen keresztül szabályozott



MEDIEJECT

VÁLTOZATOK ÉS MÉRETEK

MEDIEJECT P

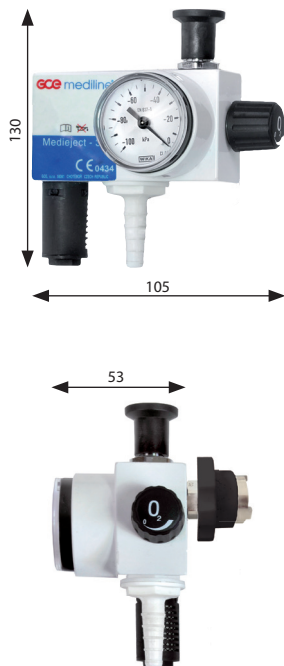

MŰSZAKI ADATOK

BE/KI kapcsolás:	BE: BE/KI kapcsológomb kihúzva KI: BE/Ki kapcsológomb benyomva
Max. bemeneti nyomás:	-950 mbar
Max. szívókapacitás:	25 l/perc
Maximális gázfesztség:	+5°C to +40°C used 50/50 N ₂ O/O ₂
Manométer pontossága:	38 l/perc
Manométer pontossága	±2,5 %
Bemeneti csatlakozás	Nemzeti szabványoknak megfelelő
Kimeneti csatlakozás	Tömlőcsatlakozás
Készülék méretek:	
Magasság:	130 mm
Szélesség:	105 mm
Mélység:	53 mm csatlakozó nélkül
Súly:	0,370 - 0,450 kg (csatlakozótól függően)
Hőmérsékleti tartomány:	
Tárolás:	-40°C-tól 60°C
Működés:	-18°C-tól 50°C
Páratartalom:	max. 70% relatív páratartalom
Megfelelőség:	MDD 93/42/EEC
Osztályba sorolás:	Ila
Gyártó:	GCE, s.r.o, Žižkova 381 583 81 Chotěboř, CZ

MEDIEJECT R



TARTOZÉKOK



Hangtompító



BE/KI kapcsoló gomb



Manométer üveg



Manométer



Tömlővég



Szabályozó gomb

GCE HUNGÁRIA KFT.

HU-2314 Halásztelek,
II. Rákóczi F. út 68. Magyarország
Tel. + 36 24 521 200, Fax. + 36 24 521 201
E-mail: sales.hu@gcegroup.com
www.gcegroup.com



Gas Control Equipment